

MONTAGEM DA CADEIRA DE RODAS PARA CÃES/ GATOS

PASSO A PASSO

Material usado:


- ✓ 01 barra de cano de 3 metros por 20 mm
- ✓ 02 rodinhas de carrinho de feira
- ✓ 04 curvas (cotovelo)
- ✓ 06 "Ts"
- ✓ 04 tampões
- ✓ 01 tubo de cola para cano de PVC
- ✓ 01 eixo (de carrinho de feira/ carrinho de bebê/ barra de ferro)
- ✓ Cordinha de varal com aproximadamente 36 centímetros para cada lado
- ✓ Mangueira de borracha (mesma medida da cordinha de varal) – pode ser encontrada em lojas de peças para ar condicionado (se for mangueira de gás pode machucar)
- ✓ Couro, fita de nylon ou tecido para o peitoral

1° PASSO

Para cães de aproximadamente 7 kilos usamos um cano de 20 mm.

Este é o início da cadeira:

- Cano
- 2 cotovelos para cano
- 6 T's

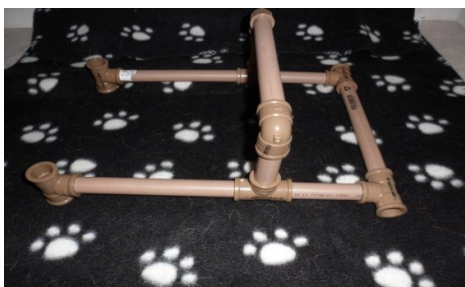

Medir a parte traseira do cão de forma "reta" para que a parte traseira da cadeira não fique grande.

Os canos deverão ser cortados exatamente do mesmo comprimento para não ficar torta a cadeira.

Esta parte onde está a fita métrica é onde será colocado o eixo para suportar o peso do cão.



2° PASSO

Colocar mais 2 cotovelos para cano e fechar a parte traseira. Naquela parte mais curta embaixo podem ser apoiados os pezinhos.



Colocar uma tampa de cano nas duas pontas – onde será colocado o eixo.

Esta é a estrutura da cadeira pronta.



3° PASSO


Eixo para a cadeira: fazer com barra de ferro (o ideal é que ela seja lisa) ou pegar um eixo de carrinho de feira.



4° PASSO

Eixo encaixado (a tampa do cano deverá ser furada para passar o eixo)

Furar com uma broca de aço rápido bem fininha (3 mm) na ponta do ferro para fixar a rodinha.

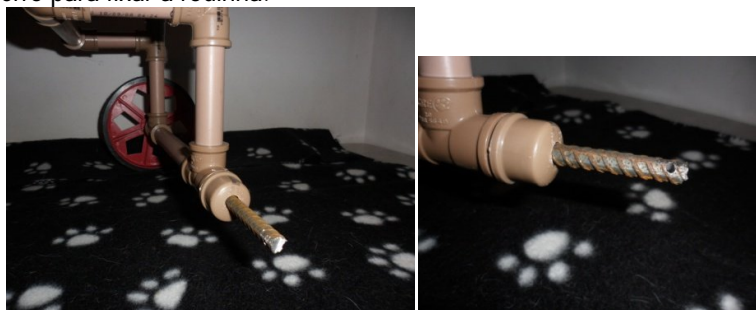

5ºPASSO

Encaixar as rodinhas (são rodas de carrinho de feira – tem em lojas de 1,99) e colocar uma trava para a rodinha não sair (pode ser usado um arame, prego)




A altura da cadeira tem que ficar certa para que não prejudique a coluna.




6ºPASSO

Para o apoio das pernas usar um pedaço de mangueira de borracha (ou algum material bem flexível, que não vá machucar a perna).

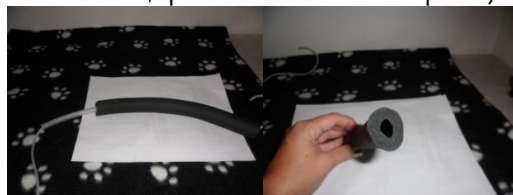


Para firmar melhor, passar um caninho de plástico por dentro da mangueira de borracha e um pedaço de corda de varal dentro do plástico. Furar o cano e amarrar as duas pontas.

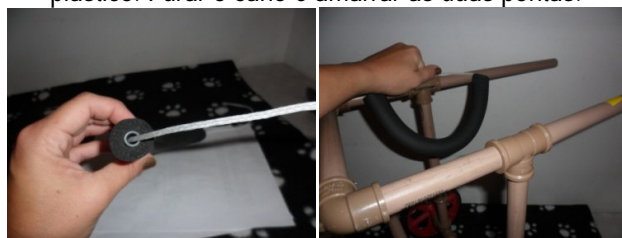

7ºPASSO


Para prender a cadeira pode ser usado uma faixa de nylon (tipo de mochila). Prender a fita no cano (pode furar o cano) e fechar nas costas do cachorro.

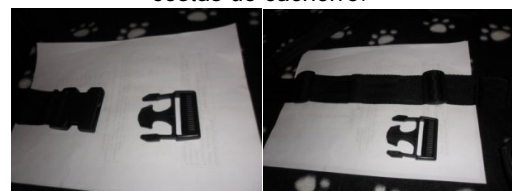

Colocar os tampões na ponta do cano para não machucar o cão.



Pode ser usada a mesma faixa para prender as duas alças de apoio para as pernas.

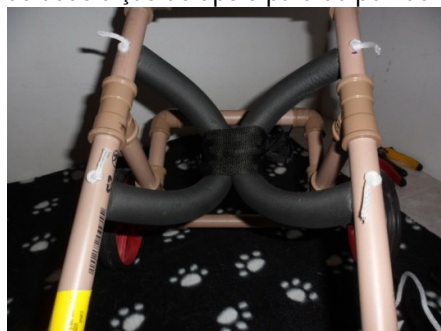

Para prender melhor poderá ser usada a guia peitoral, fazendo um furo na ponta no cano e prendendo com uma fita fina ou a cordinha de varal (amarra na ponta do cano e prende na guia).

As medidas deverão ser exatas para que não prejudique a coluna do cachorro. Sempre consultar um veterinário para verificar o tempo de uso diário da cadeira de rodas.

Qualquer dúvida por favor é só entrar em contato pelo e-mail d_nramos@hotmail.com ou pelo facebook Dani Navarro



